

مواد پیشنهادی جهت
پرسنل لمینیت
توسط دکتر مسعود صانعی
1396

Instruments

لثه بیمار حتما خشک باشد و سپس فرم داده شود.	فرم دادن لثه بدون خونریزی و کنار زدن بافت لثه جهت قالب گیری و ترمیم	تهران اتکال 87764	CTT Ceramic Tissue Trimmer	Tissue Contouring
---	---	----------------------	-------------------------------------	----------------------

Impression Materials

One-step tech Two-step tech <i>Intra oral setting time 2min</i>	Panasil Putty Soft	تهران اتکال 87764	Panasil (kettenbakh)	ماده قالبگیری A-Silicon
One-step tech (recommended) Two-step tech (highly recommended) <i>Intra oral setting time 2.5min</i>	Panasil Contact X-Light			
One-step tech (highly recommended) Two-step tech (recommended) <i>Intra oral setting time 2.5min</i>	Panasil Contact Light			

Temporary

	کامپوزیت دوال کیور جهت ساخت روکش موقت	تهران اتکال 87764	Luxa Temp (DMG)	روکش موقت کامپوزیتی
--	--	----------------------	--------------------	------------------------

Finishing & Polishing

ترتیب: مشک، قهوه‌ای، سبز		پارسه اتکال 88545400	Bousch	Mullet
ترتیب دیسک: آبی، صورتی، زرد، سفید		تهران اتکال 87764	EVE	Disk
با استفاده و یا بدون استفاده خمیر دایمونداکسل		آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	Felt & dimondexcel	High Polishing

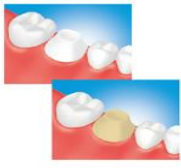
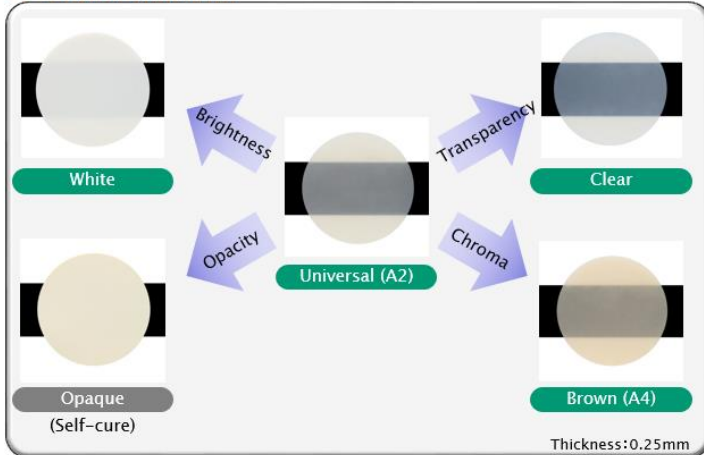
desensitizer

رفع حساسیت دندان: خمیر روی دندانهای حساس بمدت 5 دقیقه قرار گیرد و نخ دندان کشیده شود. سپس اضافات خمیر توسط زبان در دهان پخش شود و تا 30 دقیقه از غذا خوردن و نوشیدن اجتناب شود.	35 میلی کلسیم فسفات و فلوراید	دیبا طب پارس 66566007 66566008	GC MI Paste PLUS or GC Tooth Mousse	ضد حساسیت و ضد پوسیدگی کلی دندانها
---	----------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------------------

Porcelain Conditioner

پرسلنهای فلد اسپاتیک: 1-2 دقیقه پرسلنهای Heat Press 20-30 ثانیه پاک سازی با اچ اسید فسفریک به مدت 10 ثانیه	5gr (9.5% HF)	دنای کالای سینا 88998248	Porcelain Etchant BISCO	آماده سازی پرسلن
--	---------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------

Cementation

PANAVIA V5 Clinical Procedure Tooth, Metals or Composite resins^{*2}  Uncut enamel, adhesion bridges or veneers  ^{*2} For precious metal, apply ALLOY PRIMER [Acid Etching]  ※Apply K-ETCHANT Syringe to enamel surface only for 10 sec, then rinse and dry  [Apply Tooth Primer] Leave for 20 sec, and dry  PANAVIA V5 Tooth Primer <td> تهران اتکال 87764 </td><td> PANAVIA V5 Veneer Cement </td><td> کیت سمان لمینیت </td>	تهران اتکال 87764	PANAVIA V5 Veneer Cement	کیت سمان لمینیت
PANAVIA V5 Shade Variation  <td></td> <td></td> <td></td>			

Lab				
تهران، ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین سیدخندان و بزرگراه صیاد شیرازی، شماره 1282		88465045	آقای گندمی	لابراتوار گندمی